

Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться устройством, прочтите данную инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшем.

Уважаемый покупатель!


Спасибо, что вы выбрали ирригатор Water Pik для полости рта. Клинические испытания доказали, что данный ирригатор является наиболее эффективным устройством для массажа десен и чистки наиболее труднодоступных мест в полости рта. Научно доказано, что данный ирригатор способен поддерживать Ваши зубы и десны в здоровом состоянии, а также снижать количество бактерий и уменьшать зубной налет в тех областях полости рта, которые недоступны при обычной чистке зубов и ополаскивании. **Используйте данный ирригатор в строгом соответствии с данной инструкцией или в соответствии с рекомендациями Вашего стоматолога.**

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш терапевт или кардиолог предписывает вам принимать антибиотики перед проведением процедур по гигиене полости рта, проконсультируйтесь у стоматолога по поводу использования данного ирригатора и любых других средств, используемых для гигиены полости рта.

ВНИМАНИЕ:

Компания Waterpik Technologies, Inc. уделяет большое внимание качеству и безопасности своей продукции. Однако, как и любое электрическое устройство, когда оно используется детьми или теми, кто нуждается в помощи других людей, следующие основные меры безопасности всегда должны соблюдаться, чтобы не допустить удара электрическим током, пожара или повреждения чувствительных тканей.

- Перед первым использованием, а также периодически в дальнейшем, проверяйте состояние электрического провода на предмет отсутствия на нем повреждений. Провод устройства ремонту не подлежит. При обнаружении повреждения провода немедленно отсоедините его от сети и верните устройство в авторизованный сервисный центр.
- Не дотрагивайтесь до вилки провода мокрыми руками и не пользуйтесь устройством, когда принимаете ванну или душ. Устройство не должно опускаться в воду. В случае, если устройство упало в бассейн или ванну, наполненную водой, немедленно отсоедините его от электрической сети. Не пытайтесь вытащить зарядное устройство из воды до тех пор, пока оно не отключено от сети. После того, как Вы извлекли зарядное устройство из воды, не пользуйтесь им в дальнейшем (немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр).

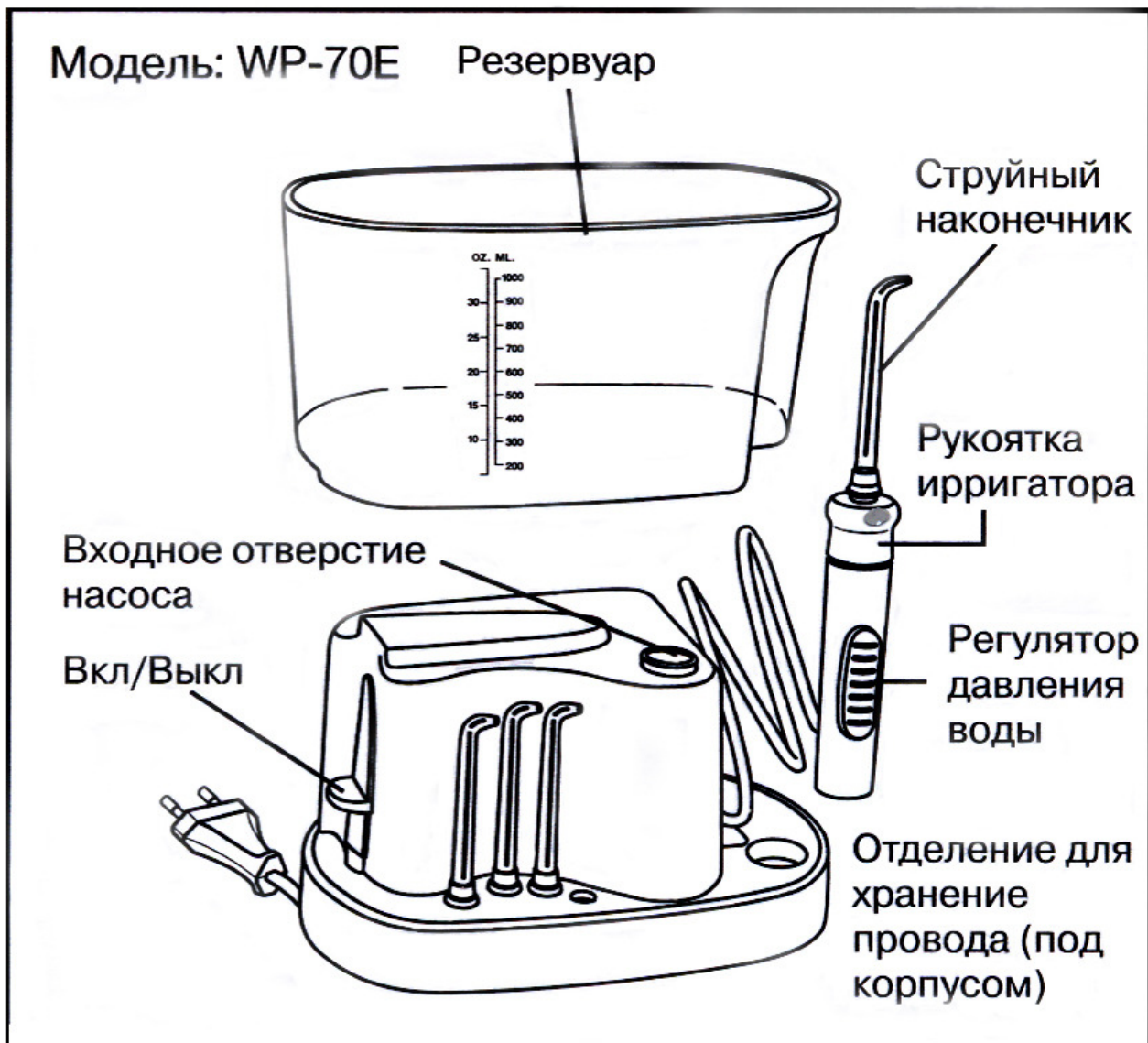

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (WP-60/WP-70)

Для Вашего удобства устройство может быть закреплено на стене с помощью кронштейна. Кронштейн может использоваться как шаблон для определения положения шурупов.

Устройство не должно использоваться вне помещения.

Электропровод должен находиться на безопасном расстоянии от нагреваемых поверхностей.



Определите необходимую длину провода, которая Вам потребуется, а оставшуюся его часть поместите в отделение для хранения провода, намотав его на соответствующие выступы на дне устройства. Не включайте устройство, если поблизости кто-то пользуется кислородным или аэрозольным распылителем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Снимите крышку, являющуюся одновременно резервуаром, и переверните ее. Наполните резервуар теплой водой, раствором для ополаскивания полости рта либо другими добавками. Поместите резервуар на корпус ирригатора таким образом, чтобы соответствующие рельефные поверхности позволили плотно установить его там.

- Выберите струйный наконечник с цветным кольцом. Возьмите рукоятку ирригатора так, чтобы Ваш большой и указательный пальцы держали рукоятку за ее фигурную головку. Надавите на эту головку в продольном направлении так, чтобы Вы могли вставить в нее струйный наконечник с цветным кольцом. Если наконечник установлен правильно, то его цветное кольцо встанет заподлицо с верхним краем головки. Вставьте наконечник как можно дальше в рукоятку и отпустите головку рукоятки, которая должна вернуться в свое первоначальное положение. Если это не произошло, слегка поверните наконечник и фигурная головка издаст щелчок, сигнализируя, что она встала на место.

- Фигурная головка должна находиться в своем первоначальном положении, чтобы наконечник был надежно зафиксирован в рукоятке. Не бросайте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия или трубку устройства. При использовании устройства в первый раз переместите регулятор давления воды в сторону основания рукоятки (чтобы создать минимальное давление). По мере того, как Вы будете использовать устройство, постепенно увеличивайте давление воды до тех пор, пока Вы не найдете такое положение регулятора, которое будет для Вас наиболее подходящим. В случае, если Вы испытываете некоторую боль или замечаете некоторое кровотечение, снизьте давление до более комфортного уровня.

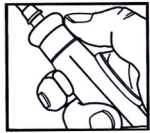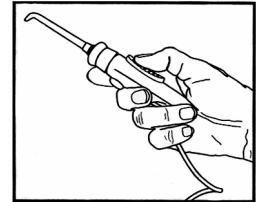

- Поместите струйный наконечник в полость рта и направьте его на Ваши зубы. Наклонитесь над раковиной и слегка сожмите губы вокруг струйного наконечника. Свободной рукой переместите переключатель "Вкл/Выкл", расположенный на корпусе устройства, в его крайнее верхнее положение. Через несколько секунд через наконечник пойдет поток воды. Вы можете временно остановить этот поток в любое время нажатием на кнопку паузы, расположенную на рукоятке.

- Направьте струю воды вдоль линии десен под прямым углом, так чтобы струя почти касалась зубов. Вода будет вытекать из Вашего рта и попадать в раковину. Непрерывно обрабатывайте струей воды Ваши верхние и нижние зубы, делайте паузы, чтобы почистить межзубные промежутки.

Будьте осторожны и не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос или другие легко ранимые области. Данный ирригатор способен создавать давление, которое может повредить ткани в этих областях.

- Когда Вы закончили использование ирригатора, свободной рукой опустите переключатель "Вкл/Выкл" вниз, чтобы выключить устройство.

- Чтобы отсоединить струйный наконечник, зажмите его пальцами и вытащите из рукоятки ирригатора. Поместите рукоятку и струйный наконечник в места для их хранения. Снимите резервуар и вылейте из него воду. Переверните резервуар и накройте им устройство. Когда устройство не используется, отсоедините его от сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только те приспособления, и сменные элементы, которые изготовлены компанией WaterPik Technologies, Inc..

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

- Антибактериальные растворы

Для достижения большего эффекта от использования Вашего ирригатора Water Pik[®], применяйте его в сочетании с любыми растворами для полоскания полости рта или с наиболее подходящим Вам антибактериальным раствором, рекомендованным Вам Вашим стоматологом.

- Скобы, коронки, мосты Ваш ирригатор Water Pik[®] является идеальным устройством для ухода за ортодонтическими скобами, коронками и мостами. Точно направленные, пульсирующие струи позволяют прочищать области вокруг ортодонтических дуг, назубных колец, скоб и труднодоступных десневых борозд, поддерживая все вставные элементы в Вашей полости рта в превосходном состоянии.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Если при использовании устройства Вы применяете какие-либо растворы, рекомендуется промывать устройство после каждого использования. Для этого частично наполните резервуар теплой водой из-под крана. Направьте рукоятку со струйным наконечником в раковину, включите прибор и дайте прибору работать до тех пор, пока резервуар не опустеет. Таким образом Вы удалите все остатки раствора из устройства, что позволит продлить срок службы ирригатора. После этого снимите струйный наконечник с рукоятки и поместите его в углубление для хранения.

- Используя мягкую ткань и мягкий, небразивный очиститель, мойте устройство, когда это необходимо. Не опускайте устройство в воду.

Перед мытьем устройства, отсоедините его от электрической сети.

- Если ожидается, что устройство некоторое время будет находится при отрицательной температуре, вылейте на некоторое время содержимое из резервуара и включите устройство, чтобы из него вышла оставшаяся в нем жидкость.

- После того, как вы выльете воду из резервуара, держите ирригатор включенным до тех пор, пока ирригатор не освободится от оставшейся в нем воды.